

GT FINDER

簡単導入/簡単操作の簡易画像ビューア

For Windows XP/Vista / 7 (32 Bit 日本語版)

「見られる」以上、「ファイリング」未満。

コスト的にもファイリングまでの規模は必要ない、でもコンピュータで簡単に画像を見たり印刷したい。

GT Finder は、このようなニーズにお応えします。

簡単インストール

インストールCD-ROMをコンピュータのドライブに挿入するだけで自動的にセットアッププログラムが起動します。

インストール中に設定作業等は必要ありません。どなたでも簡単にインストールできます。


検査リスト

検査一覧をリスト表示します。患者IDや検査日などによる表示の絞り込みの他、列のタイトルをクリックすることで簡単に表示順序を切り替えることができます。

また、リストからのドラッグアンドドロップによりフォルダに画像を保存したり、リストをクリップボードにコピーしてMicrosoft Excelに貼り付けることもできます。

2通りの使い方

SDメディア やDVD-RAMディスク等のメディアを直接開いて画像を表示する使い方はもちろんのこと、複数のメディアをハードディスクに取り込んで1つのメディアのように扱うこともできます。このようにしてハードディスクに取り込んだ仮想的なメディアをアーカイブメディアといいます。

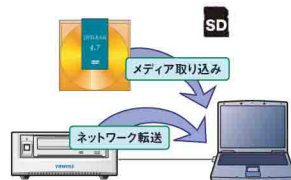

アーカイブメディア対応

TEACMV-10XS/10XS/10XD
DV-700のネットワーク転送機能にも対応し、オンライン転送による撮影後の自動取り込みも可能です。

プレビュー

画像一覧をサムネイル表示します。表示分割数は1×1～16×16の間で自由に変更することができ、画像をダブルクリックすることで全画面表示(単一表示)との切り替えが可能です。

マウスホイールの回転やスペースキーで検査をまたいで次々にページを切り替えることができます。

プレビューウィンドウ



単一表示

印刷

印刷レイアウトを自由に変更できます。プレビューと同じレイアウトでの印刷はもちろん、印刷用のレイアウトを指定することができます。印刷プレビューを表示して印刷を開始することも、印刷プレビューを表示せずに複数の検査を一括して印刷することも可能です。

プレビューでマークした画像のみの印刷、患者情報/検査情報の印刷文字サイズの変更、用紙方向や余白の設定など、施設ごとに異なるニーズに対応します。

印刷プレビュー



簡単導入/簡単操作の簡易画像ビューア

GT FINDER

「見る」と「印刷する」を最大限に効率化

必要な機能のみに特化することにより最低限のコストで最大限の効率化を。

動作環境

- OS Microsoft Windows XP / Vista / 7 (32 Bit 日本語版)
- CPU Intel Pentium III 1GHz以上 (Pentium4 3GHz以上推奨)
- RAM 512MB以上 (1GB以上推奨)
- ディスプレイ 1280×1024 (SXGA) 24ビットカラー以上推奨
- その他 DV-700のファイルを表示するには、Ulead Video StudioとMicrosoft DirectX 7.0以降 (GT Finderに付属) が必要


対応機種/対応メディア

- TEAC MV-250/50M/55M/60M/65/70/71
- TEAC MV-150/180/180F
- TEAC MV-10XS/10XS/10XD
- TEAC MV-S10/H10/D10
- TEAC DV-700
- OLYMPUS EICP-S/EICP-D
- Canon CR-DG10/CR-DG1 (要Capture-i)
- Smith&Nephew 660HD
- 本多電子 HS-1500/2000

アーカイブメディアの活用

メディア取込み

異なる種類のメディアを取込んで一括検索

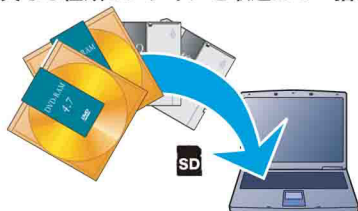

ネットワーク転送ファイル取込み

画像の記録と同時に自動転送

DV-700
MVシリーズ



動画メディアライブラリ管理

動画を静止画に変換してメディアのラベルを検索

DV-700



MOメディアをDVD-RAMにアップグレード

旧モデル (MO) のMVシリーズで記録したMOメディア複数枚をDVD-RAMメディアにまとめることができます。

* MV-10XS/XH/XDは、SDメディア、HDDにバックアップ可能

作成メディア

作成するDVD-RAMメディアを表示します。

DVD-RAMドライブがない場合はDVD-RAMメディアを作成することはできませんが、バックアップを作成することはできます。



メディアストック

MO等の「アップグレードする」メディアを追加します。メディアストックの複数のメディアを1枚のDVD-RAMメディアにまとめることができます。必要に応じて自動的に画像サイズを調整します。

メディアバックアップ

DVD-RAMメディアを作成する際に、自動的に作成メディアのバックアップを作成します。後でいつでも同じDVD-RAMメディアを作成することができます。

※ ViewFile Media Converterは、GT Finderに付属するソフトウェアです。単体での取り扱いはありません。



注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

* 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

* 記載の会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

* View Fileは、ティアック株式会社の商標および登録商標です。

GT Finder/ViewFile Media ConverterアップデートWEBサイト
<http://www.teac.co.jp/iod/mv/GTDown.htm>

情報機器事業部 BSビジネスユニット 営業部 MV営業課

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 TEL 042-356-9160 FAX 042-356-9185

● ホームページ
<http://www.teac.co.jp/>

● メールでのお問い合わせは
ipd-mv@teac.co.jp

株式会社 浅沼商会 産業機材事業部

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 TEL 047(304)3240

NBF新浦安タワー 5階 FAX 047(304)3241

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-18-4 TEL 06(6538)3114

住友生命灘町MTビル5階 FAX 06(6538)3115